


Isoclean®

实现毒性药品 无菌隔离操作!



独特的洁净气流模式

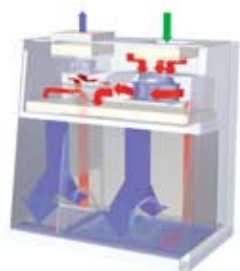

符合美国药典设计要求



气锁式样品无菌传递



高效的无菌隔离操作



新型Sentinel™程序控制系统



全面的产品性能检测



负压式安全防护性能



安全一体式废物收集

ULPA ISOCIDE 2 DUAL

隔离式药品操作安全柜

HPI-N系列

- 符合美国药典USP 797标准，更适用于环境控制要求不高的条件下使用
- 满足有毒性复合药品无菌隔离操作要求，提供人员、样品和环境多重保护
- 屏障隔离系统相比较前部开口式洁净空气设备，可以提供更优的洁净、安全的操作环境
- 工作区气流模式为负压循环或负压全外排
- 操作室气流定向模式，保证在取放样品时，操作室仍能保持无菌状态
- 隔离手套式操作，封闭环设计，手套更换简便无污染
- ULPA超高效进气过滤器，针对0.12 μm颗粒系可以达到99.999%截流效率
- Sentinel Gold™微电脑控制系统，超大数字显示屏实时显示操作区压力状态及进气流和外排气速度
- 人体工程学倾斜式设计，封闭式前窗，增加操作舒适性
- 屏障式隔离柜采用了整体式、光滑圆角不锈钢内部设计
- 密封式前窗可完全打开，进行彻底消毒和清洁操作，台面为整块钢板一体成形
- Isocide™抗菌涂层技术应用在所有粉末涂层表面，可以在24小时内消除柜体表面接触99.9%的细菌
- 可选装生物废物收集系统和液压式高度可调支架



技术参数

型 号		HPI-4N1-0	HPI-6N1-0
外部尺寸(长x宽x高 mm)		1340 x 820 x 1320	1950 x 820 x 1320
操作区尺寸(长x宽x高 mm)		840 x 610 x 670	1450 x 610 x 670
传递区尺寸(宽x深x高mm)		355 x 610 x 670	355 x 610 x 670
工作区域内空气洁净度标准		1级洁净度，ISO 14644.1 Class 3，美国联邦标准 209E Class 1 / M1.5，AS1386 Class 1.5，JIS B9920 Class 3，BS5295 Class C，KS27030.1，VDI2083和AFNOR X44101 Class M10,000	
沉降和排气过滤器		ULPA级超高效过滤器，内置金属防护网和金属框架，符合EN1822和IESTRPCC001.3要求	
高效过滤器截留效率		针对> 0.12 μm颗粒系拥有> 99.999%的截流效率	
光强照度		> 950 Lux	
柜体结构材料	主体结构	1.2 mm厚镀锌钢板，外部为环氧粉及Isocide™抗菌混合涂层	
	操作台面	1.5 mm厚304#不锈钢	
	侧壁结构	1.2 mm厚304#不锈钢	
电源/电压		220-240 V / 50 Hz，单相	
最大消耗功率/电流		290 W / 6.6 A	480 W / 7.6 A
产品净重		326.5 kg	395 kg
装运重量		392.5 kg	476.5 kg
装箱尺寸(宽x深x高mm)		1550 x 950 x 2200	2150 x 950 x 2200
装运体积		3.24 立方米	4.49 立方米

配件信息

订 货 号	技术参数
SPC-4A0	711mm支架（适用于4尺柜体）
SPC-6A0	711mm支架（适用于6尺柜体）
UV-30A	30W，254nm紫外灯
EO-HE	防溅电源插座